



**TECHNIMOUNT**  
EMS<sup>®</sup>

## **BRACKET PRO SERIE<sup>®</sup> 152-GR3**

SYSTÈME DE FIXATION POUR LE TRANSPORT TERRESTRE DES  
POMPES À INFUSION SMITHS MEDICAL<sup>®</sup> MEDFUSION<sup>®</sup> 4000

---




**SÉCURITÉ ET FLEXIBILITÉ**  
**LÀ OÙ C'EST IMPORTANT**

# BRACKET PRO SERIE® 152-GR3

## Composantes du produit

Le Bracket Pro Serie® 152-GR3 est spécialement conçu pour le transport sécuritaire des pompes à infusion Smiths Medical® Medfusion® 4000 lors du transport de soins médicaux d'urgence et de soins critiques. Ce système de fixation se conforme aux normes de sécurité les plus strictes de l'industrie pour le transport d'équipements médicaux, telles que la norme SAE J3043.

Doté de boutons du mécanisme à déclenchement rapide sur chaque porte, cette solution permet une installation et un retrait faciles des appareils médicaux. Cette conception conviviale augmente l'efficacité et permet d'assurer une continuité des soins aux patients.

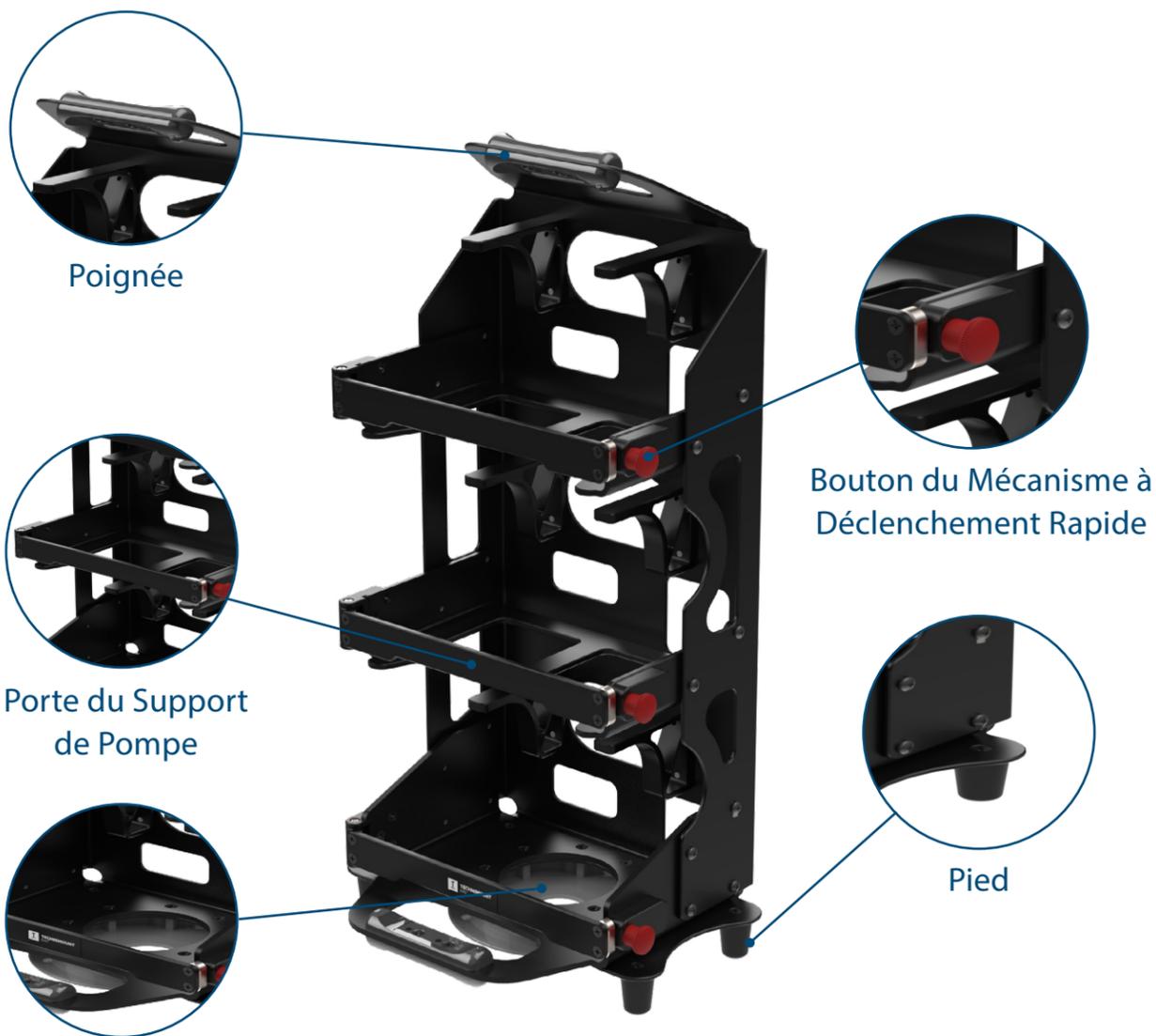

Disque Inférieur Standard


# BRACKET PRO SERIE® 152-GR3

## Points clés

### CARACTÉRISTIQUES ET BÉNÉFICES

- Fixe en toute sécurité trois pompes à infusion Smiths Medical Medfusion 4000 lors du transport de soins médicaux d'urgence ou de soins critiques.
- Conçu pour se conformer aux normes de sécurité les plus strictes de l'industrie pour le transport d'équipements médicaux, SAE J3043.
- Équipé d'un disque inférieur standard, compatible avec la Standard Surface Base de Technimount, cette solution offre une flexibilité accrue sur plusieurs surfaces de montage.
- Trois portes avec mécanismes à déclenchement rapide pour installer et retirer facilement les pompes du support.
- Accès aux appareils médicaux et aux connecteurs sous tous les angles (rotation à 360°).
- Aluminium haute densité avec fini noir anodisé, rendant le support résistant aux fluides biologiques et aux produits de nettoyage.
- Deux poignées qui facilitent la rotation, l'installation et le retrait du support.
- Pieds durables pour stabiliser le système de fixation sur toute surface plan

## CONFIGURATIONS POSSIBLES

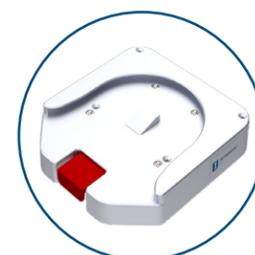

Standard Surface Base



Xtension Pro Neonatal



Xtension Pro  
Assistant - CCT



Safety Arm System

# BRACKET PRO SERIE® 152-GR3

## Spécifications techniques

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Nom du produit                        | Bracket Pro Serie® 152 - GR3  |
| Description                           | Support conçue pour sécuriser les pompes à seringue Medfusion® 4000 lors du transport de soins médicaux d'urgence ou des soins critiques  |
| Code de produit                       | 2100-20-SMMF-GR3  |
| Caractéristiques                      | -Disque inférieur compatible avec plusieurs types de surface de montage<br>-Mécanismes à déclenchement rapide sur chaque support de pompe<br>-Installation allant jusqu'à trois (3) pompes à seringue Medfusion® 4000 |
| Environnement d'opération             | - Services médicaux d'urgence/CCT (terrestre)<br>- Hôpitaux/Clinique  |
| Conformité                            | - Testé en conformité avec SAE J3043 & AMD-028  |
| Système médical compatible            | - Standard Surface Base<br>- Safety Arm System<br>- Wall Mount Pro<br>- Xtension Pro Assistant - CCT<br>- Xtension Pro Neonatal   |
| Dimensions (L X P X H)                | 11,7 po X 9,3 po X 23,9 po (29,8 cm X 23,7 cm X 60,7 cm)  |
| Poids                                 | 11,1 lb (5,1 kg)  |
| Composition                           | -Support : aluminium 6061-T6 avec fini anodisé noir et acier inoxydable<br>-Standard Bottom Base : aluminium 6061-T6 avec fini anodisé argent, acier inoxydable 304<br>-Pied, butées : acétal                         |
| Charge Maximale d'Utilisation (CMU)   | 14,1 lb (6,4 kg)  |
| Température de fonctionnement         | - 31° F à 113° F (- 35° C à 45° C)  |
| Installation                          | Les pompes à seringue sont retenues dans le support par des mécanismes à déclenchement rapide   |
| Options de modèle et de configuration | - 2100-10-SMMF-4: Bracket Pro Serie® 152<br>- Communiquer avec le service à la clientèle à l'adresse <a href="mailto:customerservice@technimount.com">customerservice@technimount.com</a> pour plus d'options         |



[technimount.com](http://technimount.com)